

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ

РАПИД-COVID-19+ГРИПП А/В-АНТИГЕН

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ



ГРАФИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

REF LSFP200



СОСТАВ НАБОРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОТРЕБУЮТСЯ:
ЧАСЫ/ТАЙМЕР

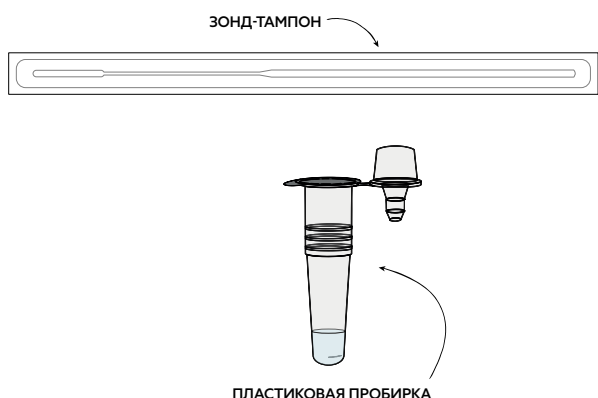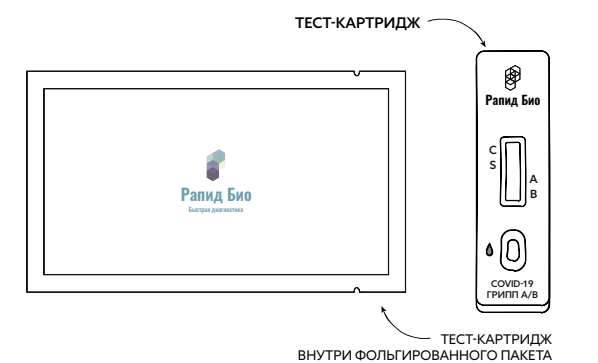


ПРОЦЕДУРА

ВАЖНО! СТРОГО СЛЕДУЙТЕ УСТАНОВЛЕННЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ОБЪЕМУ
И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА


1. ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

- ОТКРОЙТЕ УПАКОВКУ, ИЗВЛЕКИТЕ ТЕСТ-КАРТРИДЖ ИЗ ФОЛЬГИРОВАННОГО ПАКЕТА
- ПОЛОЖИТЕ ЕГО НА РОВНУЮ ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

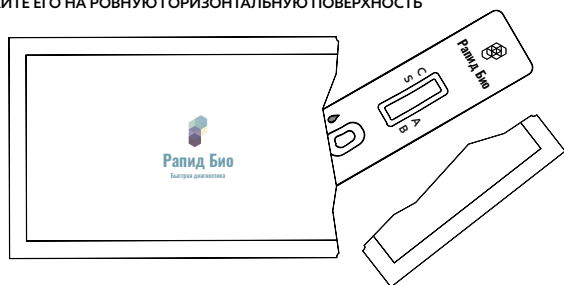


2. СБОР И ПЕРЕНОС ОБРАЗЦА

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ ЗОНДА-ТАМПОНА С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ ОТ МЯГКОГО НАКОНЕЧНИКА
- ВВЕДИТЕ НАКОНЕЧНИК ЗОНДА-ТАМПОНА В НОЗДРЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО НЁБУ НА ГЛУБИНУ 2-3 СМ
- ПРОИЗВЕДИТЕ ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И АККУРАТНО ИЗВЛЕКИТЕ ТАМПОН
- ИСПОЛЬЗУЯ ЭТОТ ЖЕ ЗОНД-ТАМПОН, ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕДУРУ ДЛЯ ДРУГОЙ НОЗДРИ

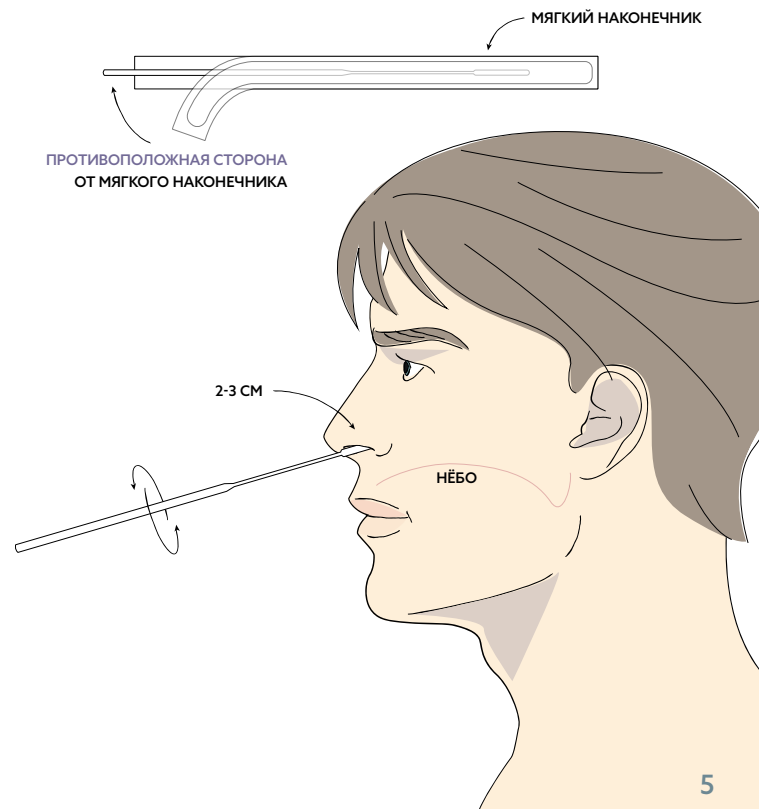


3. ДОБАВЛЕНИЕ БУФЕРНОГО РАСТВОРА


- ВСКРОЙТЕ ПРОБИРКУ
- ПОГРУЗИТЕ ЗОНД-ТАМПОН С ПОЛУЧЕННЫМ ОБРАЗЦОМ В ПРОБИРКУ С БУФЕРНЫМ РАСТВОРОМ
- ВРАЩАТЕЛЬНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ (10-20 РАЗ) РАСТВОРИТЕ ОБРАЗЕЦ В БУФЕРНОМ РАСТВОРЕ

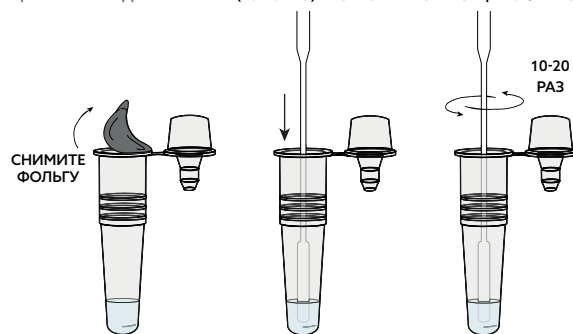

- ИЗВЛЕКИТЕ ЗОНД-ТАМПОН, ОТЖАВ ЕГО О СТЕНКИ ПРОБИРКИ
- ЗАКРОЙТЕ ПРОБИРКУ НАСАДКОЙ-КАПЕЛЬНИЦЕЙ

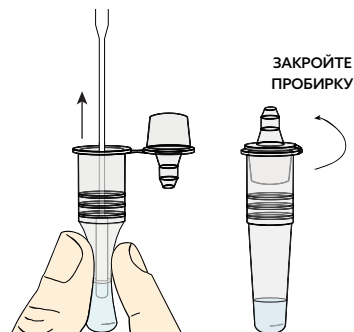

- ДОБАВЬТЕ ВСЕ СОДЕРЖИМОЕ (НО НЕ БОЛЕЕ 6 КАПЕЛЬ) В ОКНО ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ОБРАЗЦА (d)
- ЗАСЕКИТЕ 6-8 МИНУТ – ТАЙМЕР ВКЛЮЧИТЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ БУФЕРНОГО РАСТВОРА

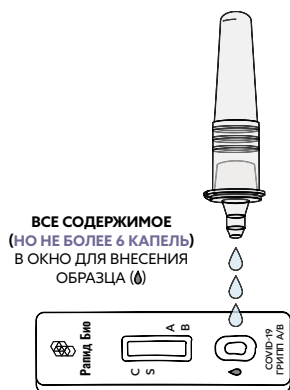

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА

ОЦЕНИВАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ ХОРОШЕМ ОСВЕЩЕНИИ, ЧЕРЕЗ 6-8 МИНУТ ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ БУФЕРНОГО РАСТВОРА, НО НЕ ПОЗДНЕЕ 15 МИНУТ.

ОКРАШИВАНИЕ ПОЛОСЫ «S»

— СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ АНТИГЕНА
КОРОНАВИРУСА SARS-COV-2 (COVID-19)

ОКРАШИВАНИЕ ПОЛОСЫ «A»

— СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ АНТИГЕНА ВИРУСА ГРИППА ТИПА А

ОКРАШИВАНИЕ ПОЛОСЫ «B»

— СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ АНТИГЕНА ВИРУСА ГРИППА ТИПА В

8


НЕДОПУСТИМО ПРИНЯТИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ТОЛЬКО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТИРОВАНИЯ БЕЗ КОНСУЛЬТАЦИИ С ПРОФИЛЬНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ

9

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:


ПОЯВЛЕНИЕ В ТЕСТОВОМ ОКНЕ ТОЛЬКО
КОНТРОЛЬНОЙ ПОЛОСЫ «C».

ОКРАШИВАНИЕ ТЕСТОВОЙ ПОЛОСЫ «S», «A» ИЛИ «B»
НЕ ПРОИСХОДИТ

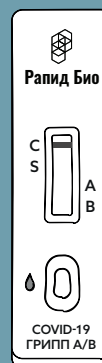

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

ПОЯВЛЕНИЕ В ТЕСТОВОМ ОКНЕ ДВУХ ИЛИ ТРЕХ
ОКРАШЕННЫХ ПОЛОС: КОНТРОЛЬНОЙ ПОЛОСЫ
«C» И ТЕСТОВОЙ ПОЛОСЫ «S», «A» ИЛИ «B»

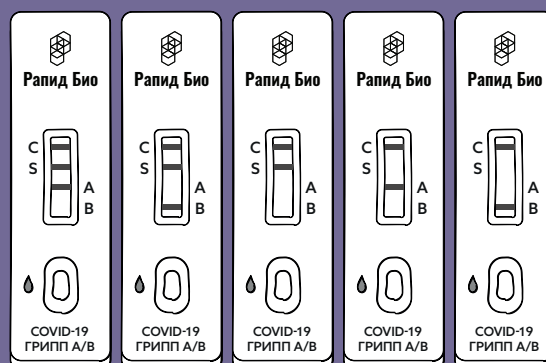

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

В ТЕСТОВОМ ОКНЕ КОНТРОЛЬНАЯ ПОЛОСА «C»
НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ
ТЕСТОВОЙ ПОЛОСЫ «S», «A» ИЛИ «B»

