

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ РАПИД-ВИЧ-АГ/АТ-ИХА

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ

ГРАФИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ


REF LFA006



Рapid Био
Быстрая диагностика

СОСТАВ НАБОРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОТРЕБУЮТСЯ:
ЧАСЫ/ТАЙМЕР

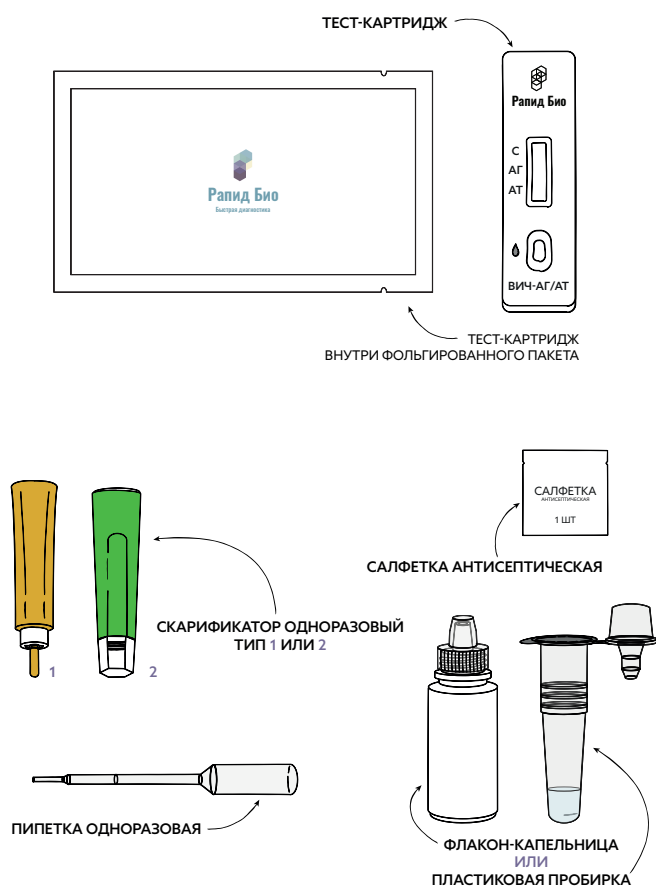


ПРОЦЕДУРА

ВАЖНО! СТРОГО СЛЕДУЙТЕ УСТАНОВЛЕННЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ОБЪЕМУ
И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

1. ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

- ОТКРОЙТЕ УПАКОВКУ, ИЗВЛЕКИТЕ ТЕСТ-КАРТРИДЖ ИЗ ФОЛЬГИРОВАННОГО ПАКЕТА
- ПОЛОЖИТЕ ЕГО НА РОВНУЮ ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

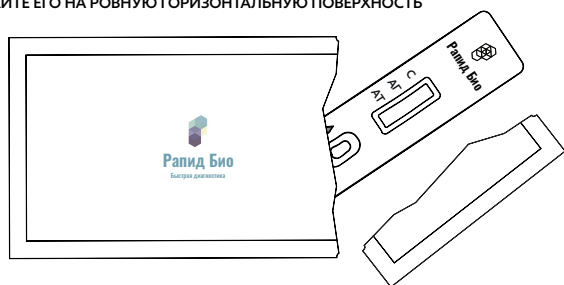


4

2. СБОР И ПЕРЕНОС ОБРАЗЦА


ТИП ОБРАЗЦА - КРОВЬ ИЗ ПАЛЬЦА

- СНИМИТЕ ЗАЩИТНЫЙ ЯЗЫЧОК СО СКАРИФИКАТОРА: ДЛЯ ЭТОГО ПОВЕРНИТЕ ЯЗЫЧОК ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ НА 180° – ОН ЛЕГКО ВЫЙДЕТ ИЗ ГНЕЗДА
- ПРОТРИТЕ ПАЛЕЦ В МЕСТЕ ПЛАНИРУЕМОГО ПРОКОЛА АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ САЛФЕТКОЙ. ДАЙТЕ ВЫСОХНУТЬ КОЖЕ
- ПРИСТАВЬТЕ ОТВЕРСТИЕ СКАРИФИКАТОРА К ПРЕДПОЛАГАЕМОМУ МЕСТУ ПРОКОЛА
- НАЖМИТЕ НА КОРПУС СКАРИФИКАТОРА ДЛЯ СПУСКА МЕХАНИЗМА.

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАРИФИКАТОРА НЕВОЗМОЖНО!

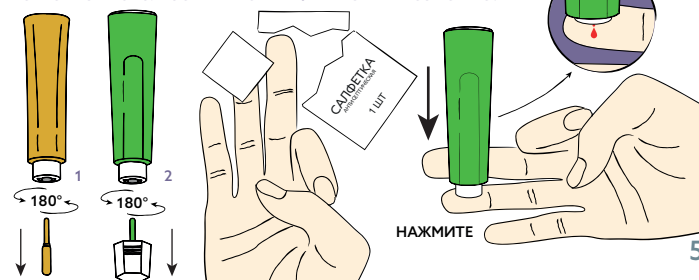

- ВОЗЬМИТЕ КРОВЬ ПИПЕТКОЙ ДО ОТМЕТКИ НА КОРПУСЕ (~30 МКЛ). В МОМЕНТ ОТБОРА КРОВИ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЛНОГО СЖАТИЯ ГРУШИ ПИПЕТКИ
- ВНЕСИТЕ ВСЮ КРОВЬ В ОКНО ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ОБРАЗЦА (6) ТЕСТ-КАРТРИДЖА

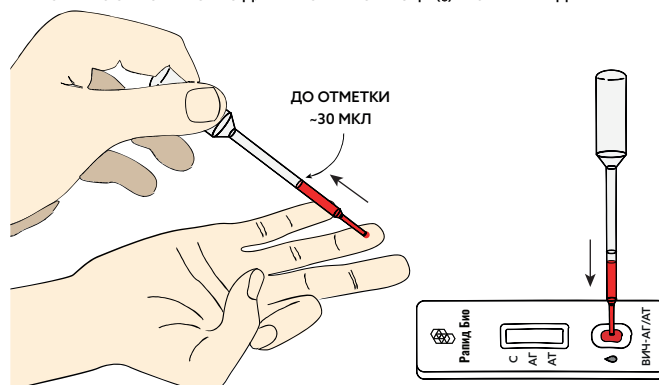


2

6

ТИП ОБРАЗЦА - СЫВОРОТКА/ПЛАЗМА

- ПОЛУЧИТЕ СЫВОРОТКУ/ПЛАЗМУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕАНАЛИТИЧЕСКОГО ЭТАПА, ПРИНЯТЫМИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
- ВНЕСИТЕ 30 МКЛ ОБРАЗЦА С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОЗАТОРА В ОКНО ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ОБРАЗЦА (6) ТЕСТ-КАРТРИДЖА "ВИЧ-АГ/АТ"

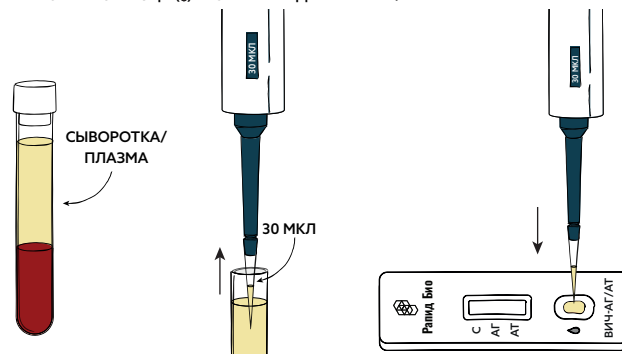

7

3. ДОБАВЛЕНИЕ БУФЕРНОГО РАСТВОРА


ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ОБРАЗЦА (КРОВЬ ИЗ ПАЛЬЦА, СЫВОРОТКА, ПЛАЗМА)

- ЕСЛИ В КОМПЛЕКТЕ ПЛАСТИКОВАЯ ПРОБИРКА: СНИМИТЕ ФОЛЬГУ, НАДЕНЬТЕ КРЫШКУ-КАПЕЛЬНИЦУ (1)
- ЕСЛИ В КОМПЛЕКТЕ ФЛАКОН-КАПЕЛЬНИЦА: ОТКРУТИТЕ КРЫШКУ (2)



8

- ДОБАВЬТЕ БУФЕРНЫЙ РАСТВОР В ОКНО ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ОБРАЗЦА(♾️): 1 КАПЛЮ ИЗ ПРОБИРКИ (1) ИЛИ ИЗ ФЛАКОНА (2)
- ЗАСЕКИТЕ 8 МИНУТ — ТАЙМЕР ВКЛЮЧИТЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ БУФЕРНОГО РАСТВОРА

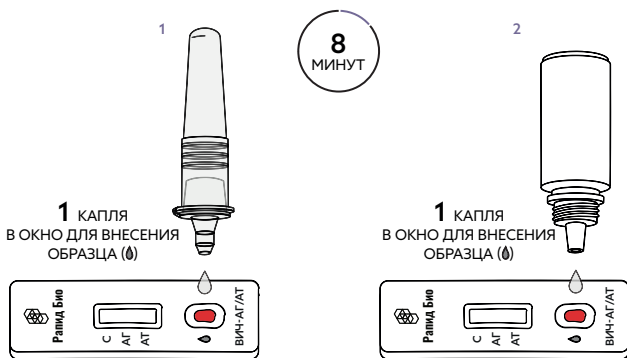

9

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА


ОЦЕНИВАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ ХОРОШЕМ ОСВЕЩЕНИИ, ЧЕРЕЗ 8 МИНУТ ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ БУФЕРНОГО РАСТВОРА, НО НЕ ПОЗДНЕЕ 60 МИНУТ

НЕДОПУСТИМО ПРИНЯТИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ТОЛЬКО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТИРОВАНИЯ БЕЗ КОНСУЛЬТАЦИИ С ПРОФИЛЬНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ

10




ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

В ТЕСТОВОМ ОКНЕ ТОЛЬКО ОДНА КОНТРОЛЬНАЯ ПОЛОСА "С"

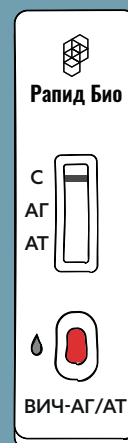

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

В ТЕСТОВОМ ОКНЕ ОКРАШЕНЫ ДВЕ И БОЛЕЕ ПОЛОСЫ: КОНТРОЛЬНАЯ "С" И ТЕСТОВЫЕ "АГ" И/ИЛИ "АТ". ЛЮБУЮ СТЕПЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ОКРАСКИ ТЕСТОВЫХ ПОЛОС СЛЕДУЕТ РАСЦЕНИВАТЬ КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

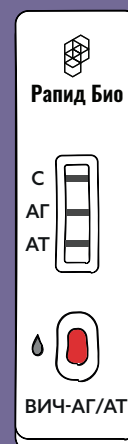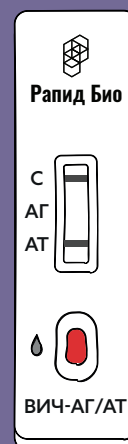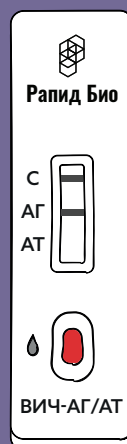

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

КОНТРОЛЬНАЯ ПОЛОСА "С" ОТСУТСТВУЕТ, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ ПОЛОС "АГ" И/ИЛИ "АТ" И ЕЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОКРАШИВАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОВТОРИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ

